



acuv^{is}

gocce oculari

Acuv^{is} gocce oculari è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione isotonica, sterile, a pH fisiologico, privo di conservanti, a base di acido ialuronico, glicerina e acque distillate ed è contenuto in strip da 5 fiale monodose riempiti a 0,5mL.

La combinazione di acido ialuronico e glicerina conferisce alla goccia oculare un'azione protettiva, idratante ed emettente che stabilizza e reintegra il film lacrimale e minimizza gli attriti durante l'ammiccamento.


Acuv^{is} gocce oculari è indicato per alleviare gli stati di arrossamento ed affaticamento oculare proteggendo l'occhio da fattori ambientali ed atmosferici (inquinamento, smog, salsedine, acqua clorata, vento, polvere, fumo, clima secco, aria condizionata) o stress visivi dovuti principalmente ad un uso prolungato dei dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet), studio intenso, guida prolungata, esposizione prolungata ai raggi solari.

Acuv^{is} gocce oculari è una soluzione rinfrescante indicata anche per coloro che soffrono di secchezza oculare occasionale o scarsa lacrimazione, donando sollievo agli occhi e ritrovando il benessere quotidiano.

Acuv^{is} gocce oculari può essere somministrato prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

MODALITÀ PER L'USO

1. Aprire la busta di alluminio
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Separare la fiala monodose dallo strip ed aprirla ruotando il tappo
4. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 1/3 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala e riutilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore
6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto
7. Il prodotto in fiala è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

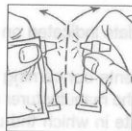


ACCARE IL MONODOSE



APRIRE IL MONODOSE



USARE IL CONTENUTO

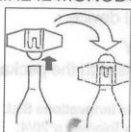

RICHIUDERE DOPO L'USO

FREQUENZA D'USO

Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico 0,15%, glicerina 0,2%, Acqua distillata di Vaccinium Myrtillus, Acqua distillata di Hamamelis Virginiana, Acqua distillata di Camomilla Recutita, Acqua distillata di Euphrasia Officinalis, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE

La confezione è composta da 2 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL e richiudibile.

AVVERTENZE

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperta, la fiala monodose può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ

36 mesi a confezione integra.

Enable Innovations S.r.l.
Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia
COSWELL S.p.A
Via Gobetti 4, 40050
Funo di Argelato (BO) ITALIA
www.coswell.biz

CE 0425

MD

Rev.05 Gennaio 2023

STERILE A

GA19990



REF 050337



Acuvis eye drops is a Medical Device for ophthalmic application consisting of a sterile isotonic saline solution, with physiological pH, preservative-free based on hyaluronic acid, glycerin and distilled waters contained in a strip of 5 single-dose vials filled at 0,5 ml.

The combination of hyaluronic acid and glycerin confers to the eye drops a protective, hydrating and humectant action that helps to stabilize and reinstate the lacrimal film and reduce the friction during blinking.

Acuvis eye drops is intended to relieve from the ocular redness and fatigue protecting the eye from environmental and atmospheric factors (pollution, smog, sea water, chlorine water, wind, dust, smoke, dry climate, air conditioning) or from visual stress due to prolonged use of electronic devices (computer, smartphone, tablet), intense study, prolonged driving, and prolonged exposure to sunlight.

Acuvis eye drops is a refreshing solution studied for people suffering of occasional dry eye or lack of tearing. It gives prompt relief and restores the daily wellness.

Acuvis eye drops can be instilled before the application and during the use of contact lenses to improve application and comfort.

INSTRUCTION FOR USE

1. Open the protective foil pouch.
2. Carefully clean hands before the use.
3. Separate the single-dose vial from the strip and open it by twisting the cap.
4. Gently press the single-dose vial and instill 2/3 drops per eye.
5. After the instillation, close the vial and reuse the residue solution within 12 hours;
6. Store the unused vials in their original package.
7. The product is single patient to avoid possible contamination.
8. The product can be used with contact lenses.

FREQUENCY OF USE

Instill 2/3 drops per eye, 2-3 times a day or according to the doctor's opinion.

COMPOSITION

Hyaluronic acid 0,15%, glycerin 0,2%, Vaccinium Myrtillus distilled water, Hamamelis Virginiana distilled water, Chamomilla Recutita distilled water, Euphrasia Officinalis distilled water, sodium chloride, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, purified water.

PACKAGING

The box is composed of 2 foil pouches each one containing one strip of 5 single-dose vials. Every single-dose vial is filled at 0,5 ml and it is recyclable.

WARNINGS

- The product is for ophthalmic use only, do not ingest or use otherwise than the indication of use.
- Once open, the single-dose vial can be reclosed with its cap and the residue solution can be reused within 12 hours to avoid possible contamination of the product.
- Keep out of reach and sight of children.
- During the instillation do not touch the eye or other surfaces with the nozzle of the single-dose vial.
- Do not use the product in case of known incompatibility to even one single component of the formulation.
- If necessary, check with your optician for the compatibility with the contact lenses use.
- In case of adverse reaction during the use, immediately suspend the treatment and consult your doctor.
- Consult your doctor for use during pregnancy, lactation and for children.
- The treatment with ophthalmic drugs or other ophthalmic medical devices must be carried out under the supervision of a doctor who can evaluate possible interactions.
- In case of compromised ocular surface or damage cornea consult your doctor.
- Do not use the product after the expiration date indicated on the package.
- In the event of any serious claims or incidents concerning the device, it should be reported the incident to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is established, to provide more information on the safety of this medical device.


VALIDITY

36 months with the package intact.


Enable Innovations S.r.l.
Via Claudio Tolomeo n°20/4;
41012 Carpi (MO), Italia

COSWELL S.p.A
Via Gobetti 4, 40050
Funò di Argelato (BO) ITALIA
www.coswell.biz

Rev.05 January 2023

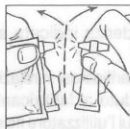


DETACH THE SINGLE-DOSE

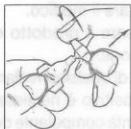

OPEN THE SINGLE DOSE



USE THE CONTENTS

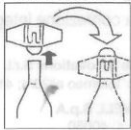

RECLOSE AFTER USE

301215



GA19990



REF 050337

